

Bleach'n Smile

Chairside Bleaching



**Bleach'n
Smile**



nur
1
Termin

bis zu
10
Töne

ab
20
Minuten*

Verfärbungen gezielt und effektiv behandeln, damit Ihre Patienten wieder lachen können

Strahlend weiße Zähne mit Bleach'n Smile Automix Set – ausschließlich für die Verwendung am Behandlungsstuhl entwickelt.

Weißer Zähne gehören zum Anspruch an ein gepflegtes Äußeres und stehen für Gesundheit, Pflege und Erfolg. Es heißt, Menschen mit weißen Zähnen seien selbstbewusster, sympathischer und erfolgreicher im Job und in der Liebe. Viele Menschen leiden unter devitalen oder krankhaft verfärbten Zähnen. Zustandekommen durch Krankheiten oder Unfälle werden dunkle Zähne als äußerst lästig empfunden. Chairside-Bleaching ist daher gefragter denn eh und je.

Profitieren Sie als Zahnarzt von dem Wunsch Ihrer Patienten nach strahlend weißen Zähnen. Mit dem Bleach'n Smile Automix Set geben wir Ihnen das ideale Produkt an die Hand.

Ihre Vorteile Bleach'n Smile System

Die spezielle Formel mit **Kaliumnitrat** und **Natriumfluorid** hilft Empfindlichkeiten vorzubeugen!

- ✓ **pH-neutraler** Wert von 7,3 (pH-Wert Blut = 7,4)
- ✓ Äußerst **schonend** zum natürlichen Zahn
- ✓ **Zuverlässig** und **schnell** in der Anwendung
- ✓ Bleaching von **devitalen/verfärbten Zähnen**
- ✓ Ideale **standfeste Konsistenz** für eine **angenehme** und **einfache** Verarbeitung
- ✓ **Wasserbasiert** – schützt vor Austrocknung der Zähne
- ✓ **Kaum Sensibilitäten** nach der Behandlung
- ✓ Aktiver **Kariesschutz** durch Xylitol (After Bleaching Care)
- ✓ Sehr gute **Abdeckung** und **Schutz** der Gingiva (Dental Dam)
- ✓ **Wirtschaftlichkeit** durch **Doppelkammersystem** + **Sicherheitsclip**

Doppelkammersystem + Sicherheitsclip

Erst in der Mischkanüle werden Bleichgel und Aktivator gemischt. Das Doppelkammersystem in Verbindung mit dem Sicherheitsclip sorgt für Lagerstabilität und ermöglicht es Ihnen, nur so viel Gel zu aktivieren, wie Sie tatsächlich benötigen. Das gemischte Gel enthält 35% Wasserstoffperoxid.

Vorteile des Systems

- ✓ **Schnelleres** und **einfacheres Handling** als mit zwei einzelnen Spritzen
- ✓ Sichere Lagerung: **Keine Entmischung** und **keine Blasenbildung**
- ✓ Präzise **Portionierung** und dadurch **längere Verwendung**
- ✓ **Wirtschaftlichkeit**: Nur so viel Gel aktivieren wie für Behandlung benötigt wird



Schritt für Schritt zu überzeugenden Ergebnissen

Ausgangssituation – 2M 2



Before

Der Wunsch nach einem strahlenden Lächeln.

1 Polieren + Zahnfarbe bestimmen



Vorpolieren mit fluoridfreier Polierpaste.

2 Gingivaschutz auftragen



Nach dem Einsetzen des Wangen-/Zungenabhalters applizieren und polymerisieren Sie den Bleach'n Smile Dental Dam (Gingivaschutz). *Wichtig: Schützen Sie die Lippen vor dem Einsetzen des Wangen-/Zungenabhalters mit Vaseline.*

3 Bleach'n Smile Gel applizieren



Tragen Sie nun das Bleach'n Smile Gel auf die labialen Zahnflächen auf (Schichtdicke 1–2 mm).

4 Bleaching Gel absaugen



Nach einer 10-minütigen Einwirkzeit saugen Sie das Gel wieder ab.

5 Säubern



Spülen Sie die Zähne nun sorgfältig ab. Bei Bedarf können Sie die Prozedur bis zu zweimal wiederholen.

6 Dental Dam entfernen




Entfernen Sie den Dental Dam nun ganz einfach vorsichtig mit einer Sonde/Pinzette.

7 After Bleaching Care



Tragen Sie zum Schluss noch die After Bleaching Care Creme zur Remineralisierung und Desensibilisierung der Zähne auf.

Endergebnis – OM 2

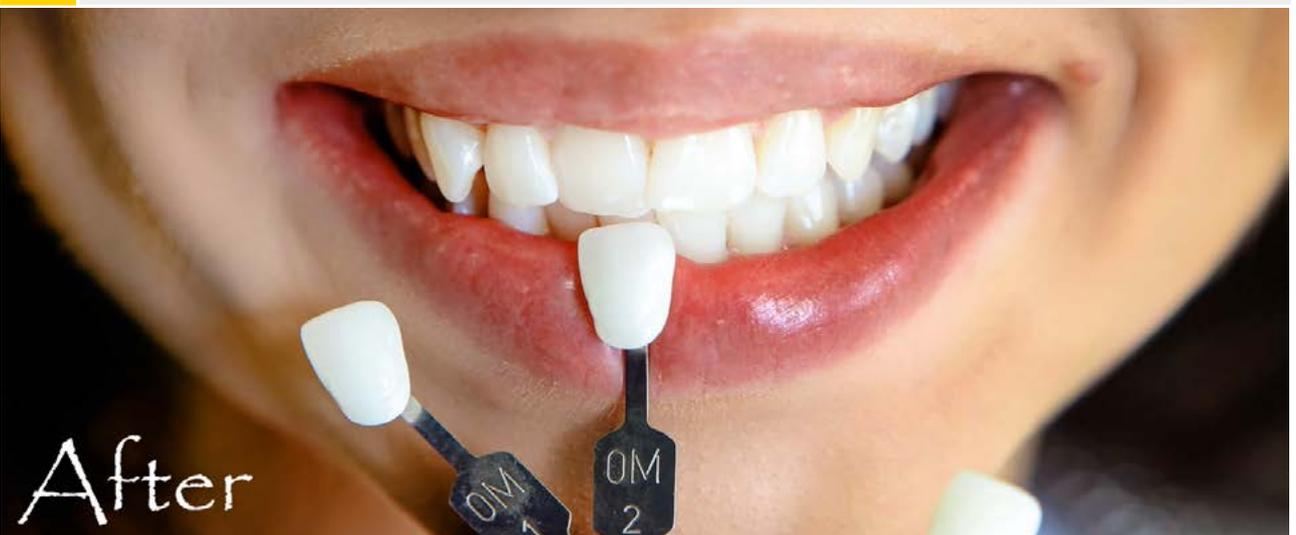

Bleach'n Smile auf einen Blick

In-Office Bleaching

Ausschließlich für die Verwendung am Behandlungsstuhl entwickelt.

Indikationen:

- Medizinische Aufhellung von Zähnen
- Für labiale Zahnflächen
- Für devitale oder krankhaft verfärbte Zähne geeignet
- Endo-Bleaching

Refill Sets



Bleach'n Smile Gel

mit 35 % Wasserstoffperoxid nach dem Mischen

Art.-Nr. 237051

Ihre Vorteile

- ✓ Ideale standfeste Konsistenz
- ✓ Einfache schnelle Anwendung
- ✓ Schnelle Tiefenwirkung
- ✓ Schonend zum natürlichen Zahn
- ✓ pH-neutraler Wert von 7,3
- ✓ Keine Entmischung
- ✓ Keine Blasenbildung
- ✓ Zuverlässig



Dental Dam

für den sicheren Schutz der Gingiva

Art.-Nr. 237020

Ihre Vorteile

- ✓ Gute Haftung an der Gingiva
- ✓ Geringe Wärmeentwicklung
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Starker Kontrast zur Gingiva
- ✓ Zeitersparnis ggü. Kofferdam
- ✓ Hohe Standfestigkeit



enthält Kaliumnitrat und Natriumfluorid

Art.-Nr. 237050



1 x Bleach'n Smile Gel 35 % H₂O₂, 5 g
1 x Dental Dam, 1,5 g, inkl. Applikationskanülen
1 x After Bleaching Care Creme, 2 ml



After Bleaching Care Creme

zur Remineralisierung und Desensibilisierung der Zähne

Art.-Nr. 237052

Ihre Vorteile

- ✓ Aktiver Kariesschutz durch Xylitol
- ✓ Reduziert Sensibilitäten nach Bleaching Behandlung
- ✓ Reduziert Hypersensibilitäten

Home Bleaching

Bleach'n Smile Home ist ein Bleichgel zur Aufhellung verfärbter Zähne. Es eignet sich zur schonenden Behandlung mittels einer individuell angefertigten Schiene. Nach Einweisung durch den Zahnarzt kann der Patient das Material selbstständig anwenden.

Indikationen:

- Aufhellung devitaler oder krankhaft verfärbter Zähne*
- Medizinische Aufhellung von Zähnen

Ihre Vorteile:

- ✓ Starke Wirkung
- ✓ Einfache und sichere Anwendung
- ✓ Erhältlich in zwei Geschmacksrichtungen
- ✓ Kaum Sensibilitäten nach der Behandlung

*unter Verwendung einer Schiene



enthält Kaliumnitrat und Natriumfluorid

Pfefferminz (Art.-Nr. 237035)
Kirsch (Art.-Nr. 237031)



Kontakt

Wir sind gerne für Sie da:

Telefon	+49 (0) 6003 814-0
Fax	+49 (0) 6003 814-906
E-Mail	info@schuetz-dental.de

www.schuetz-dental.de

Besuchen Sie uns online und profitieren Sie von exklusiven Rabatten in unserem Onlineshop.

Schütz Dental Newsletter

Abonnieren Sie unseren Newsletter und profitieren Sie von vielen Vorteilen: www.sdent.eu/newd

