




TIP GUIDE


AIRSCALING

Create it 

NSK


Eine Auswahl an Spitzen für jeden Bedarf

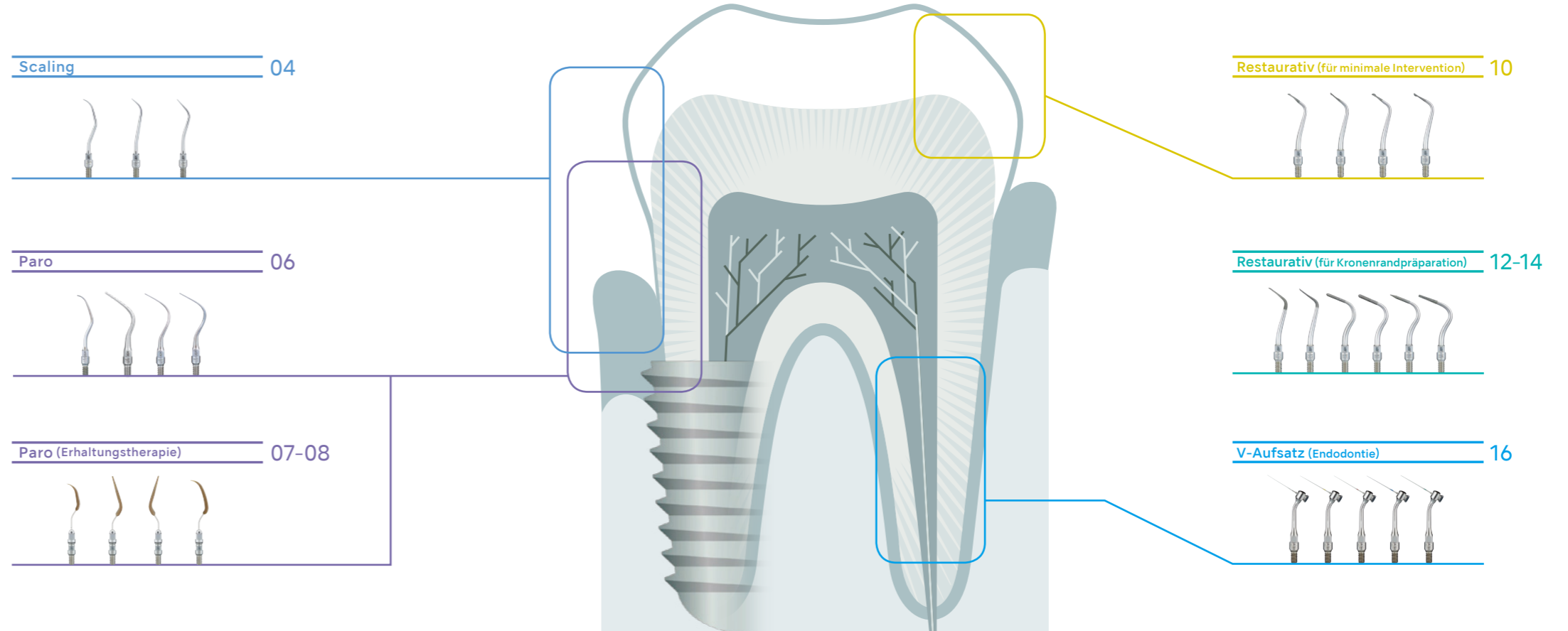

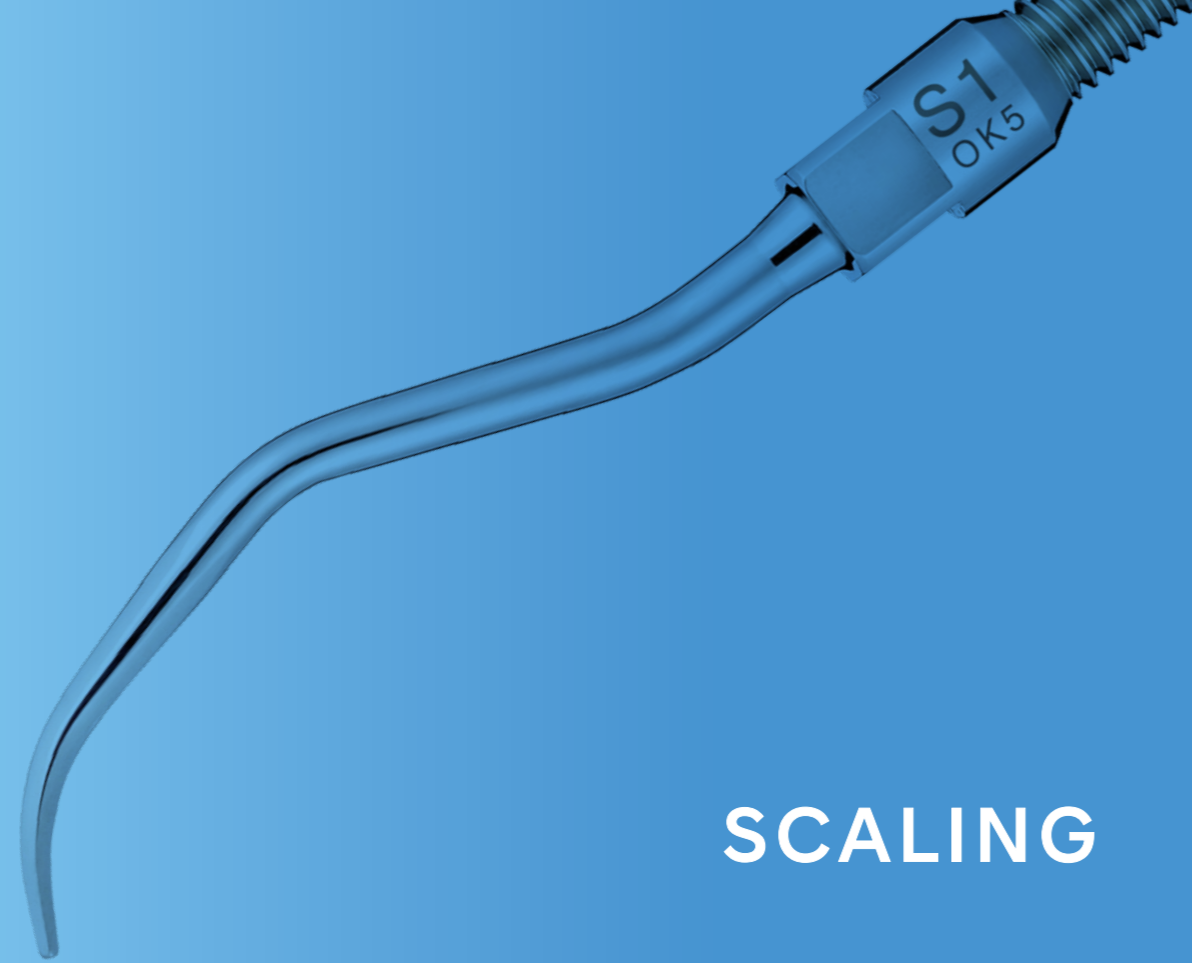



SCALING

SCALING

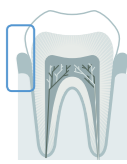

MODELL S1

- Entfernung von supragingivalem Zahnstein
- Entfernung von Zahnstein an der marginalen Gingiva

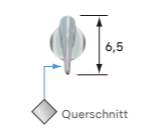
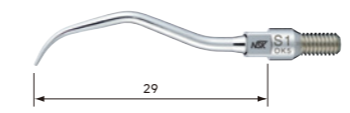


BESTELLCODE **Z252411**

- Aufsatz Universal

MODELL S2

- Entfernung von supragingivalem Zahnstein

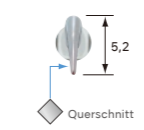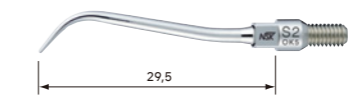



BESTELLCODE **Z252413**

- Aufsatz Sichel



MODELL S3

- Entfernung von supragingivalem Zahnstein
- Entfernung von Zahnstein an der marginalen Gingiva

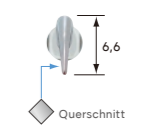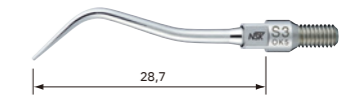


BESTELLCODE **Z252412**

- Aufsatz Paro

PARO





PARO

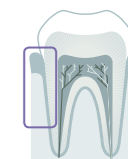

MODELL S10

- Entfernung von subgingivalem Zahnstein und Biofilm
- Entfernung von Zahnstein in engen Zahnzwischenräumen

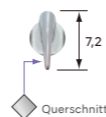
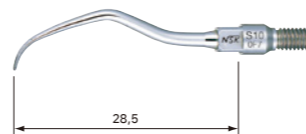


BESTELLCODE **Z252420**

- Universal-dünn slim line

MODELL S20

- Entfernung von subgingivalem Zahnstein und Biofilm
- Entfernung von subgingivalen Konkrementen und Biofilm

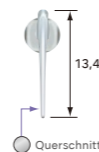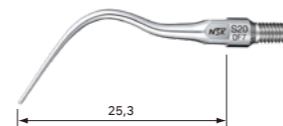


BESTELLCODE **Z252441**

- Für Wurzelglättung (lang, gerade)

MODELL S21R

- Entfernung von subgingivalem Zahnstein und Biofilm
- Entfernung von Zahnstein in engen Zahnzwischenräumen
- Entfernung von subgingivalen Konkrementen und Biofilm


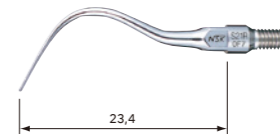


BESTELLCODE **Z252442**

- Für Wurzelglättung (lang, rechts)

MODELL S21L

- Entfernung von subgingivalem Zahnstein und Biofilm
- Entfernung von Zahnstein in engen Zahnzwischenräumen
- Entfernung von subgingivalen Konkrementen und Biofilm

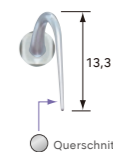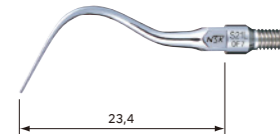


BESTELLCODE **Z252443**

- Für Wurzelglättung (lang, links)



PARO (Erhaltungstherapie)

Für die Reinigung von Prothesen und implantatgestützten Prothesen.
Diese Aufsätze bestehen aus einem speziellen Material, welches Prothesen und restaurative Materialien nicht beschädigt.

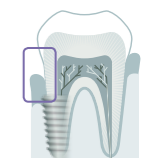

MODELL V-P10

V-P10 dient der Reinigung und Erhaltung von Prothesen. Form und Krümmung bieten einfachen Zugang in alle Bereiche.




BESTELLCODE **Y900184**

• Packung à 3 St. • S35-Aufsatzhalter nicht enthalten



MODELL V-P11R

V-P11R/L für links und rechts ist eine doppelt gekrümmte Spitze. Diese Spitze ist extra lang für den Zugriff auf schwer zugängliche Bereiche und zur Vermeidung einer Beeinträchtigung angrenzender Zähne oder Konturen. Ihre Form wurde für die optimale Anpassung an unterschiedliche Zahnmorphologien konzipiert, was sie zu einer vielseitigen Spitze für einen breiten Anwendungsbereich von Frontzähnen bis zu Prämolaren macht.

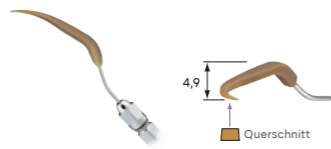

BESTELLCODE **Y1002165**

• Rechts gebogene Spitze • Packung à 3 St.
• S35-Aufsatzhalter nicht enthalten



MODELL V-P11L




BESTELLCODE **Y1002166**

• Links gebogene Spitze • Packung à 3 St.
• S35-Aufsatzhalter nicht enthalten

MODELL V-P12

V-P12 ist die längere Version des beliebten V-P10 Aufsatzes. Dadurch bietet dieser Aufsatz ein breites Einsatzspektrum.

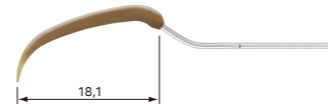

BESTELLCODE **Y1002167**

• Packung à 3 St. • S35-Aufsatzhalter nicht enthalten



MODELL S35

V-Aufsatz-Halter



BESTELLCODE **Z252015**

• beinhaltet Schlüssel zum Wechseln der Aufsätze
• Kunststoff-Aufsatz in Lieferung nicht enthalten.


MODELL Perio-Control Aufsatzset für Airscaler




BESTELLCODE **Y1002754**

• 1 x S35-Halter
• 1 Stück Wechselschlüssel E-Aufsatz
• V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12 : je 1 Stk.

RESTAURATIV

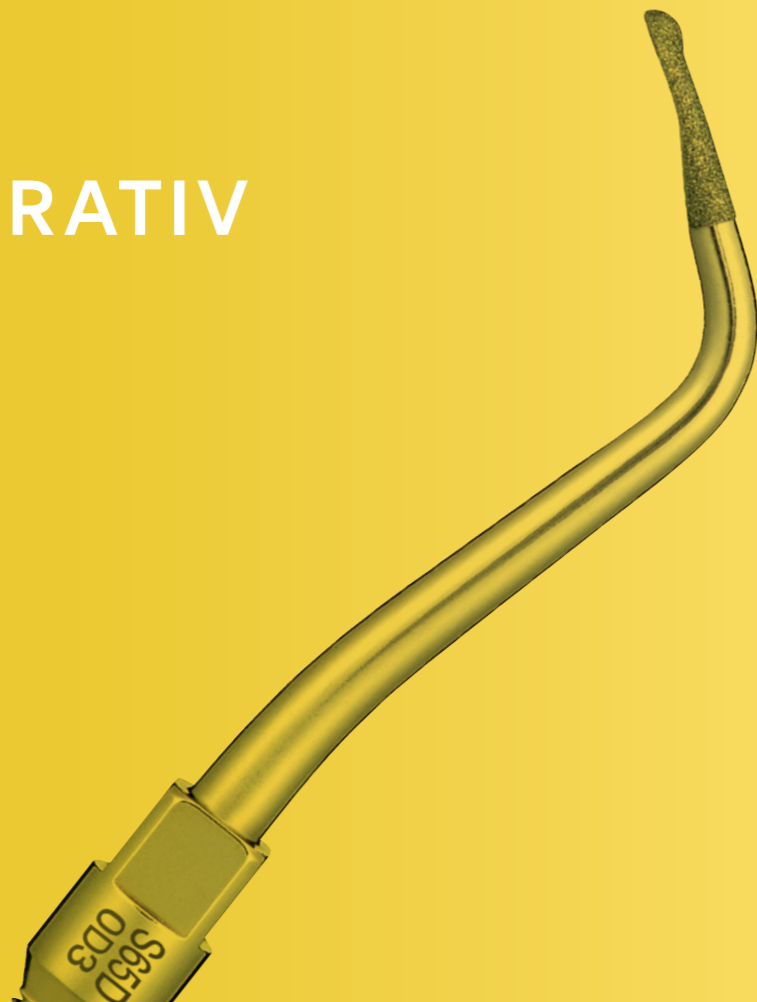

RESTAURATIV (für minimale Intervention)

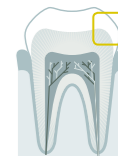





MODELL **S65D**

MODELL **S66D**

MODELL **S67D**

MODELL **S68D**

Aufgrund der Kugelform eignen sich diese Spitzen für filigrane Korrekturen sowie für die Entfernung von Karies im zervikalen und interproximalen Bereich.

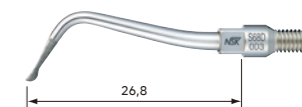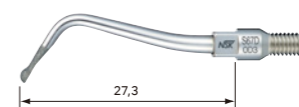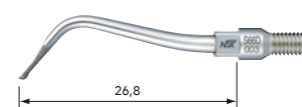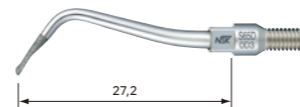

BESTELLCODE **Z252465**

BESTELLCODE **Z252466**

BESTELLCODE **Z252467**

BESTELLCODE **Z252468**

• Diamant-Beschichtung


• Diamant-Beschichtung

• Diamant-Beschichtung

• Diamant-Beschichtung



Entfernung von Karies im zervikalen und interproximalen Bereich.


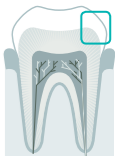


RESTAURATIV (für Kronenrandpräparation)

MODELL **S71D**

MODELL **S72D**

Diese Spitzen weisen eine diamantierte sowie eine undiamantierte, glatte Seite auf und sind für minimale mesiale oder distale Präparationen flach geformt.

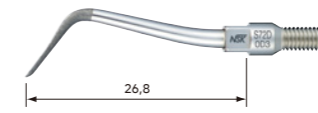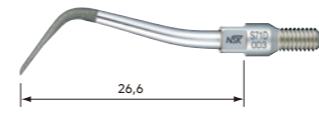


BESTELLCODE **Z252471**


BESTELLCODE **Z252472**

• Diamant-Beschichtung

• Diamant-Beschichtung

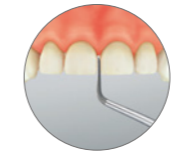


RESTAURATIV

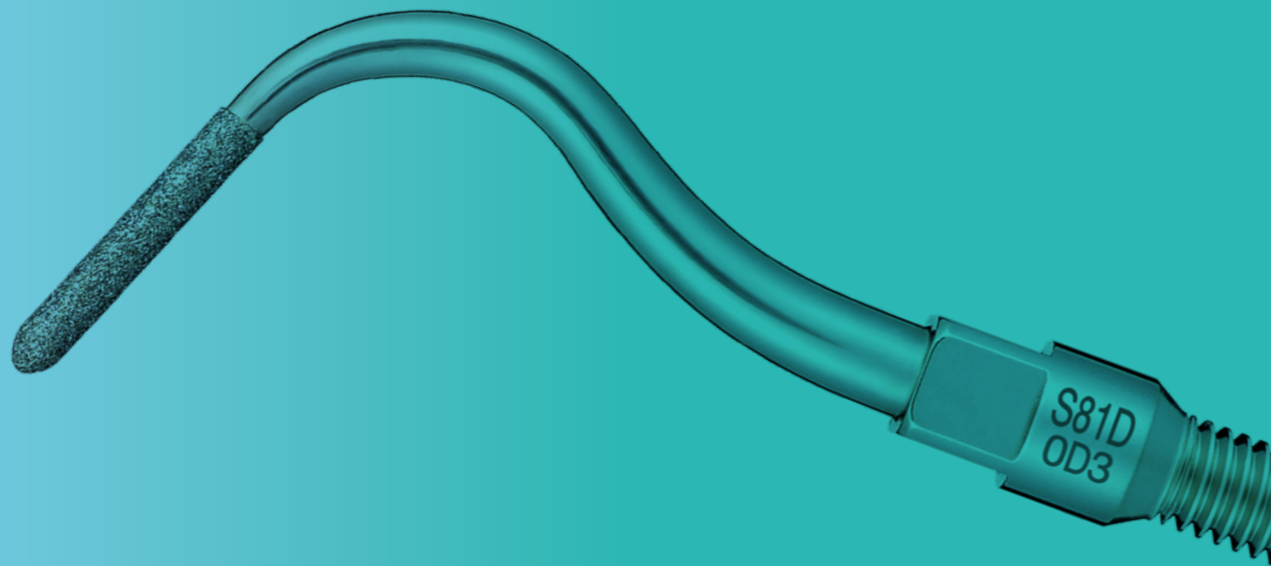

RESTAURATIV

RESTAURATIV (für Kronenrandpräparation)

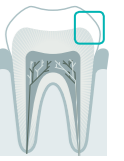








MODELL **S81D**

MODELL **S82D**

MODELL **S83D**

MODELL **S86D**

Diese Spitzen können für das Finishing der Kronenränder nach der Vorbereitung des Bereichs mit einem konventionellen Zahnbohrer verwendet werden. Sie ermöglichen die Feinbearbeitung von winzigen scharfen Kanten und Zahnfleischtaschen ohne Verletzung, was mit rotierenden Instrumenten alleine nicht gelingen kann.

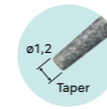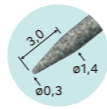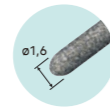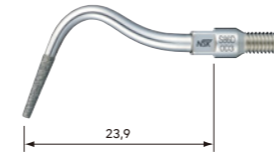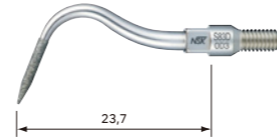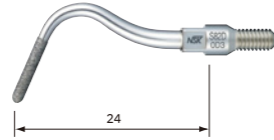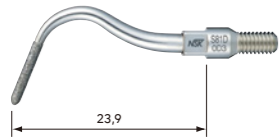

BESTELLCODE **Z252469**

BESTELLCODE **Z252462**

BESTELLCODE **Z252461**



BESTELLCODE **Z252460**


• Diamant-Beschichtung

• Diamant-Beschichtung

• Diamant-Beschichtung


• Diamant-Beschichtung

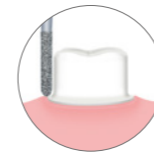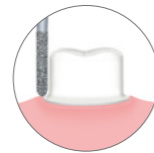

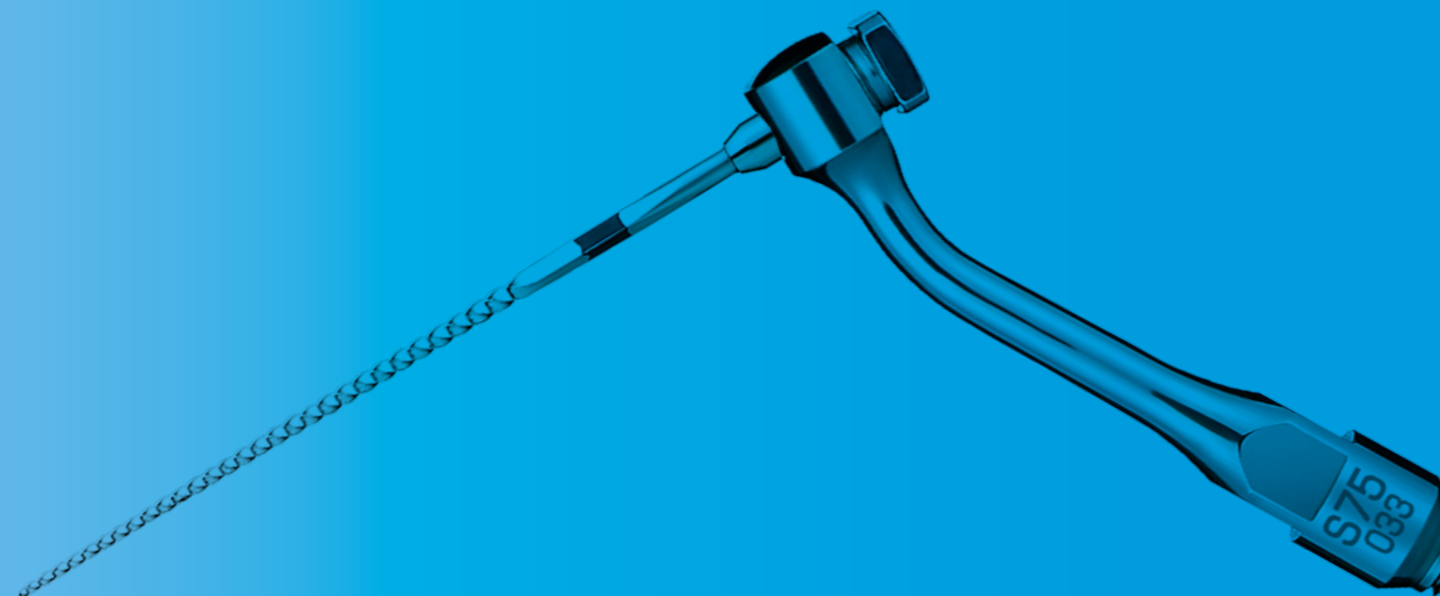


V-AUFSATZ SYSTEMREIHE

V-AUFSATZ SYSTEMREIHE

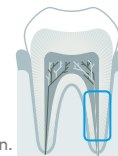

Das NSK V-Aufsatz-System ist innovativ, multifunktional und wirtschaftlich. Der V-Aufsatz-Halter ist eine separate Komponente für die tatsächlichen Arbeitsansätze und kann ganz einfach und kostengünstig ersetzt werden. Dieses System bietet eine hohe Flexibilität und Ausbaubarkeit und erfüllt eine Vielzahl unterschiedlichster Anforderungen.

MODELL **S75**

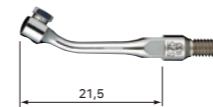


BESTELLCODE **Z252035**

• beinhaltet Schlüssel zum Wechseln der Aufsätze

V-AUFSATZ SYSTEMREIHE (Endodontie)



MODELL **V-U15**

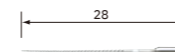

BESTELLCODE **Y900177**

• V-Feile 23 mm • ISO 15 • Packung à 6 St.


MODELL **V-U20**



BESTELLCODE **Y900178**

• V-Feile 23 mm • ISO 20 • Packung à 6 St.


MODELL **V-U25**

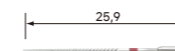

BESTELLCODE **Y900179**

• V-Feile 23 mm • ISO 25 • Packung à 6 St.


MODELL **V-U30**

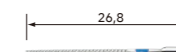

BESTELLCODE **Y900180**

• V-Feile 23 mm • ISO 30 • Packung à 6 St.

MODELL **V-U35**

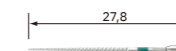

BESTELLCODE **Y900181**

• V-Feile 23 mm • ISO 35 • Packung à 6 St.



Ti-Max S970 Air Scaler



- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Zellglasoptik • 3 Stufen Power Ring
- inkl. 3 Prophylaxe-Aufsätze (S1, S2 & S3), Drehmomentschlüssel (CR-20) und Aufsatzschutz (L)

NSK Kupplungen

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	S970L	T1005
—	S970	T1020

KaVo® Kupplungen

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	S970KL	T1013

Dentsply Sirona® Kupplungen

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	S970SL	T1015

KaVo und Multiflex sind eingetragene Warenzeichen der KaVo Dental GmbH.
Dentsply Sirona und Sirona sind eingetragene Warenzeichen der Dentsply Sirona Inc.

Waschbar im Thermodesinfektor

Autoklavierbar

POWER GUIDE

Der NSK Power Ring bietet drei unterschiedliche Leistungsstufen für verschiedene klinische Anforderungen. Während sich der behutsame Minimalmodus für filigrane Verfahren eignet, ist die maximale Leistungsstufe für die allgemeine Zahnsteinentfernung ausgelegt.

ANWENDUNGEN	SPITZEN	LEISTUNGSEINSTELLUNG (Power Ring)		
		1	2	3
Scaling	S1, S2, S3	←————→		
Paro	S10, S20, S21R, S21L	←————→		
Paro (Erhaltungstherapie)	S35+V-Tip (V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12)	←————→		
Restaurativ (Kronenrandpräparation)	S81D, S82D, S83D, S86D, S71D, S72D	←————→		
Restaurativ (minimale Intervention)	S65D, S66D, S67D, S68D	←————→		
V-Aufsatz (Endodontie)	S75 + V-Tip (V-U15~V-U35)	←————→		

■ Beginnen Sie stets mit einer geringen Leistungsstufe, und stellen Sie dann nach Bedarf eine höhere Stufe ein.

■ Eine fehlerhafte Anwendung kann dazu führen, dass die Spitze bricht, auch wenn sie im empfohlenen Leistungsbereich verwendet wird. Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung.

NAKANISHI INC. www.nsk-dental.com
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

NSK Europe GmbH www.nsk-europe.de
Elly-Beinhorn-Strasse 8, 65760 Eschborn, Germany

Änderungen vorbehalten.